

## La medida del Lactato:

- El nivel óptimo del entrenamiento individual bajo presión, solamente puede ser determinado de forma precisa, mediante la medida del incremento del lactato en la sangre!
- Un entrenamiento forzado es ineficaz
- este método optimiza los entrenamientos de resistencia, la óptima utilización del metabolismo de consumo de las grasas y una más equilibrada actividad del corazón!

## Productos y Accesorios:

### Lactate Scout SOLO

Instrumento Lactate Scout, 2 pilas AAA/LR03, manual de instrucciones

### Lactate Scout BASIC Set

Instrumento Lactate Scout, 2 pilas AAA/LR03, Bolsa de transporte con cinta de cierre, solución de control, manual de instrucciones.

### Lactate Scout START Set


Instrumento Lactate Scout, 2 pilas AAA/LR03, Bolsa de transporte con cinta de cierre, pinchador, 25 lancetas, 30 toallitas con alcohol, 6 tiras, solución de control, manual de instrucciones, poster y otros documentos, CD

### Big Pack 24+

Tubo con 24 tiras, 30 lancetas y 30 toallitas con alcohol

- **Big Pack 48+** Tubo con 48 tiras, solución de control
- **Big Pack 72+** Tubo con 72 tiras
- **PC Pack USB / Bluetooth**  
Software „Lactate Scout Assistant“ para análisis de los resultados, que incluye un cable aprobado para uso técnico-médico, para PC

Para mayor información contactar con:  
[www.lactatescout.com](http://www.lactatescout.com)

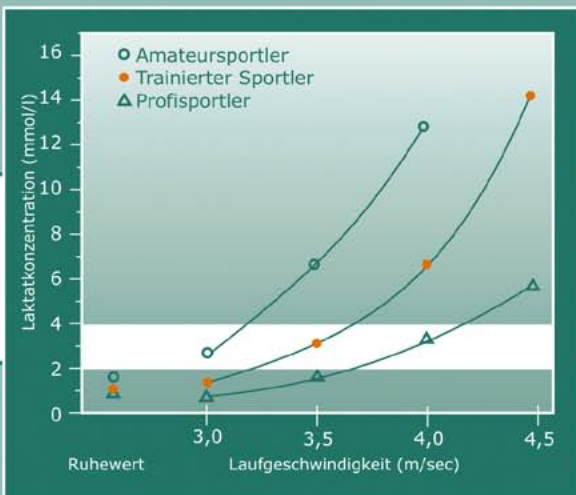

Version 2.0-09/2006  
Technische Änderungen vorbehalten  
5215-9069-0652



Vertrieb:  
EKF - diagnostic sales GmbH  
Ebendorfer Chaussee 3  
D-39179 Barleben/Magdeburg  
Tel. +49(0)39203-785-0  
Fax +49(0)39203-785-24  
[www.EKF-diagnostic.de](http://www.EKF-diagnostic.de)



Produzent:  
SensLab GmbH  
a Member of EKF - Group  
Bautzner Str. 67  
D - 04347 Leipzig  
Tel. +49(0)341-2341841  
Fax +49(0)341-2341840  
[www.senslab.de](http://www.senslab.de)

LACTATE SCOUT

Funcionamiento  
bajo control




## Lactate SCOUT

- Una ayuda para el entrenamiento eficaz!
- Rápido y fácil de usar, con tiras y selector de pantallas
- Una gotita de sangre 0,5 µl, es suficiente
- Resultados fiables en 15 segundos
- Rango de medida: 0,5 - 25,0 mmol/l
- CV: 3 % (según la concentración)
- Memoria para 250 resultados, PC Interface, programa individual

## Medida rápida y sencilla:

- Tomar una tira y colocarla en el Lactate Scout
- limpiar, higienizar y secar el lóbulo de la oreja o el dedo
- pinchar el área con una lanceta
- poner en contacto el Lactate Scout con la tira en la gotita de sangre
- la tira absorberá solo 0,5 µl sangre, la medición se realiza automáticamente
- A los 15 segundos, el valor aparece en la pantalla y queda memorizado
- Múltiples opciones para tests progresivos y análisis con el PC-Software

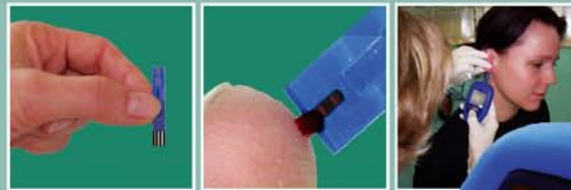

## Se puede utilizar en:

- supervisiones médicas y diagnósticos en medicina del deporte
- en fisioterapia y rehabilitación
- en instituciones deportivas, centros de fitness, clubs y entrenadores
- en entrenamiento individual y de equipo,
- como alternativa fiable y económica al análisis de laboratorio
- puede ser utilizado por amateurs y profesionales
- acreditado CE como aparato de diagnóstico médico (Directiva IVD)

# LACTATE SCOUT

- Medida del Lactato de forma profesional, rápida y sencilla!
- Basada en el diagnóstico preciso del metabolismo!
- El análisis objetivo del rendimiento en el deporte!
- Un soporte para entrenadores, amateurs y clubs!

