

Pourquoi mesurer le lactate?

- est-ce pour votre santé, la fitness ou la préparation de compétition: Seulement un entraînement ciblé vous mène au succès!
- uniquement en mesurant la valeur de lactate montant, le niveau optimal de l'entraînement se laisse déterminer exactement:
- l'inefficacité d'un entraînement trop forcé peut être reconnu et évité à temps.
- Une augmentation significatif de l'endurance, perte de poids et des fonctions cardiaques équilibrés

Produits & accessoires:

Lactate Scout SOLO

Appareil de mesure Lactate Scout, 2x batteries.

Lactate Scout BASIC Set

Appareil de mesure Lactate Scout, 2x batteries, sac à banane.

Lactate Scout START Set

Appareil de mesure Lactate Scout, 2x batteries, sac à banane, micro lancette, 30 lancettes, 30 compresses d'alcool, 6 bandelettes réactifs, solution de teste, mode d'emploi, un poster et une CD avec des informations.


Big Pack 24+

24 bandelettes réactifs avec 25 lancettes et 30 compresses d'alcool.

- Big Pack 48+**, 48 band. réactifs + solution de teste
- Big Pack 72+**, 72 bandelettes réactifs
- PC Pack USB / Bluetooth**
Logiciel de visualisation et d'administration „Lactate Scout Assistant“ sur CD, câble spécial certifié technico-médicalement, USB cable ou Bluetooth pour Lactate Scout & PC (Windows XP recommandé).

Contactez-nous:

www.lactatescout.com

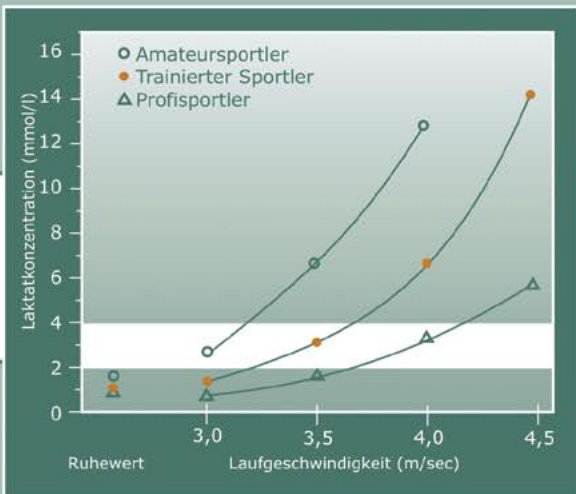

Version 2.0-09/2006
Technische Änderungen vorbehalten
5215-9069-0652



Vertrieb:
EKF - diagnostic sales GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
D-39179 Barleben/Magdeburg
Tel. +49(0)39203-785-0
Fax +49(0)39203-785-24
www.EKF-diagnostic.de



Produzent:
SensLab GmbH
a Member of EKF - Group
Bautzner Str. 67
D - 04347 Leipzig
Tel. +49(0)341-2341841
Fax +49(0)341-2341840
www.senslab.de

LACTATE SCOUT

La Performance
est en vos mains




Lactate SCOUT

- Pour un entraînement effectif!
- Facile & vite à manier grâce au scroll et aux bandelettes réactifs
- Une goutte de sang (0,5 µl) suffit
- En 15 secondes un résultat fiable
- Sphère de mesure: 0,5 - 25,0 mmol/l
- Imprécision: 3 - 8% (dépend de la concentration)
- 250 cases mémoires, passerelle de PC & grammes d'entraînement individuels

Mesurez facilement & vite:

- Sortez une bandelette réactive & introduisez-la dans le Lactate Scout
- Lavez, désinfectez, & séchez le doigt ou le lobe de l'oreille
- Pointez le lieu du prélèvement
- Cueillez le sang avec la bandelette
- L'absorption de 0,5 µl de sang s'effectue automatiquement
- Après 15 sec de durée de mesure le résultat est indiqué et mémorisé
- Beaucoup des options pour des tests d'étapes et d'évaluation sur PC

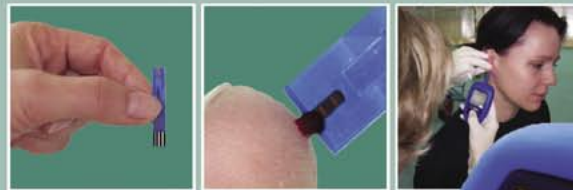

Disponible partout:

- L'analyse de puissance médicale pour l'encadrement médico-sportif
- En physiothérapie & réhabilitation
- Les studios de fitness, associations de sport & personal coaching
- L'entraînement particulier ou en groupe, le sport de loisir ou professionnel
- Une alternative flexible abordable ainsi qu'un complément de laboratoire
- Comfortable et hygiénique aussi pour une utilisation privée; certifié d'après la directive IVD européenne (CE 0123)

LACTATE SCOUT

- Mesure de lactate professionnelle, facile & vite
- À base du métabolisme pour un entraînement d'endurance optimal
- L'analyse de puissance intelligente pour le sport et le fitness
- Accompagnement médico-sportif pour entraîneurs, amateurs et associations

