

Pomiar zakwaszenia: w jakim celu?

- Zarówno w przypadku prowadzenia zdrowego trybu życia, uprawiania fitness, w czasie zajęć rekreacyjnych lub podczas przygotowań do meczy - tylko zdrowy i właściwie przygotowany trening prowadzi do zamierzonych celów!
- Indywidualny dla każdego poziom wysiłku może być bardzo precyzyjnie wyznaczony jedynie na podstawie zakwaszenia organizmu.
- Dzięki pomiarowi zakwaszenia można uniknąć nieefektywnego treningu.
- Niezwykle skuteczny trening wytrzymałości fi zycznej, optymalne spalanie tkanki tłuszczowej oraz dokładna kontrola aktywności fi zycznej w zestawieniu z pomiarem tętna

Produkty:

Lactate Scout SOLO

Urządzenie Lactate Scout, 2 baterie AAA

Lactate Scout BASIC Set

Urządzenie Lactate Scout, 2 baterie AAA, etui

Lactate Scout START Set

Urządzenie Lactate Scout, 2 baterie AAA, etui, automat do nakłuwania, 25 igiełek, 30 płytek odkażających, roztwór weryfi kujący 2.5ml, instrukcja, 6 pasków testowych


Big Pack 24+

24 paski testowe w opakowaniu + 30 igiełek z płytkami odkażającymi

- **Big Pack 48+**, 48 paski testowe, roztwór weryfi kujący
- **Big Pack 72+**, 72 paski testowe
- **PC Pack USB / Bluetooth**
Oprogramowanie "Lactate Scout Assistant", kabel do połączenia z komputerem



www.lactatescout.com

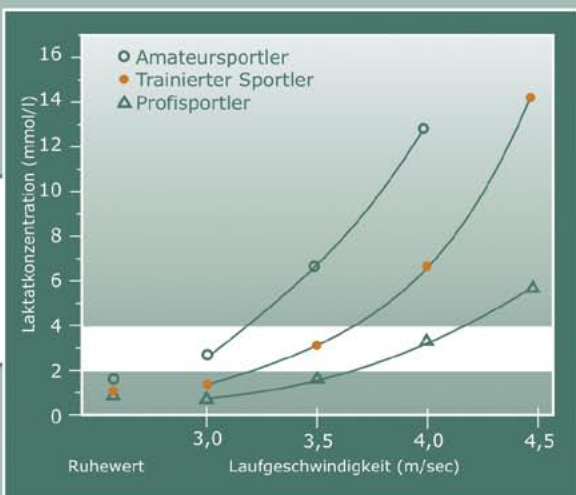

Version 2.0-09/2006
Technische Änderungen vorbehalten
5215-9069-0652



Vertrieb:
EKF - diagnostic sales GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
D-39179 Barleben/Magdeburg
Tel. +49(0)39203-785-0
Fax +49(0)39203-785-24
www.EKF-diagnostic.de



Produzent:
SensLab GmbH
a Member of EKF - Group
Bautzner Str. 67
D - 04347 Leipzig
Tel. +49(0)341-2341841
Fax +49(0)341-2341840
www.senslab.de

LACTATE SCOUT

**Wyniki
pod kontrol**




Lactate SCOUT

- Pomoc w efektywnym treningu!
- Szybka i prosta obsługa urządzenia dzięki wygodnym paskom testowym i wielofunkcyjnemu przyciskowi
- Wymagana tylko kropla krwi (0.5µl)
- Wiarygodny rezultat już w 15sek.
- Zakres pomiaru: 0,5 - 25,0 mmol/l
- Pamięć 250 pomiarów, PC - link oraz indywidualny program treningowy

Szybki i łatwy pomiar:

- Po prostu wyjmij pasek testowy z fi olki i włóż do urządzenia
- Wyczyść, odkaż i wysusz płatek ucha lub opuszek palca
- Naciśnij nakłute miejsce
- Przytrzymaj pasek przy nakłuciu, aby nabrać kroplę krwi
- Do rozpoczęcia pomiaru wystarczy tylko 0,5 µl krwi na pasku
- Po 15 sek na wyświetlaczu pojawia się wynik
- Różnorodność wyboru stopnia testu oraz analiza za pomocą programu komputerowego w Twoim PC

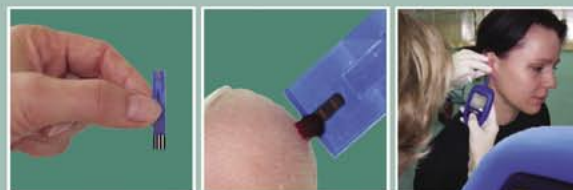

Może być stosowany w każdej sytuacji i przez każdego:

- Podczas badań w medycynie sportowej
- Podczas fi zykoterapii i rekreacji
- Przez instytucje sportowe, kluby fitness, kluby sportowe i trenerów
- Podczas treningów indywidualnych i grupowych
- Tanie urządzenie laboratoryjne o wielu możliwościach zastosowania
- Wygodny w użyciu, zapewnia maksymalną higienę
- Posiada akredytację EU Directive IVD (CE 0123)

LACTATE SCOUT

- Szybki, dokładny i łatwy do wykonania pomiar zakwaszenia organizmu
- Kształtowanie wytrzymałości formy sportowej w oparciu o diagnozowanie metabolizmu
- Analiza skuteczna w trakcie leczenia i podczas profesjonalnych treningów
- Sportowy i medyczny przewodnik dla trenerów, amatorów i zawodników

