

Varför mäta mjölksyra?

- Oavsett om det gäller god allmänhälsa, en fysisk prestation eller tävlingsidrott - endast målmedveten & individual. träning leder till succé!
- Att optimera varje individs träning, utan att ha tillgång till objektiva mätdata såsom ex mjölksyra är jättesvårt!
- Slöseri med dyrbar tid samt „fel“ träning kan undvikas med hjälp av Lactate Scout!
- Kontinuerlig objektiv träningsuppföljning ger kunskap om hur kroppen uppnår förbättrad uthållighet & ämnesomsättning, samt på vilken nivå hjärta bör arbeta.

Produktöversikt & tillbehör:

Lactate Scout SOLO

Innehåller 1 Lactate Scout Mjölksyra-analysator, 2st. AAA/LR03 batterier.

Lactate Scout BASIC Set

Innehåller 1 Lactate Scout Mjölksyra-analysator, 2st. AAA/LR03 batterier, midjeväska med bälte.

Lactate Scout START Set

Innehåller 1 Lactate Scout Mjölksyra-analysator, 2st. AAA/LR03 batterier, midjeväska med bälte, testlösning och bruksanvisning, 30 tvätttussar, Autolancett, 25 lancetter, 6 testremsor, Service-CD och 1 affi sch.

Big Pack 24+

24 testremsor + 25 lancetter & 30 tvätt-tussar.


- **Big Pack 48+**, 2x 24 testremsor + testlösning

- **Big Pack 72+**, 3x 24 testremsor

- **PC Pack USB / Bluetooth**

Software „Lactate Scout Assistant“ Programvaran med en CE-godkänd, USB cable or extern Bluetooth-adaptor för Lactate Scout & PC (Bluetooth-USB Dongle inkl.). Kräver normal PC-konfiguration med Windows XP & en ledig USB-port.

För mer information besök hemsida:
www.lactatescout.com

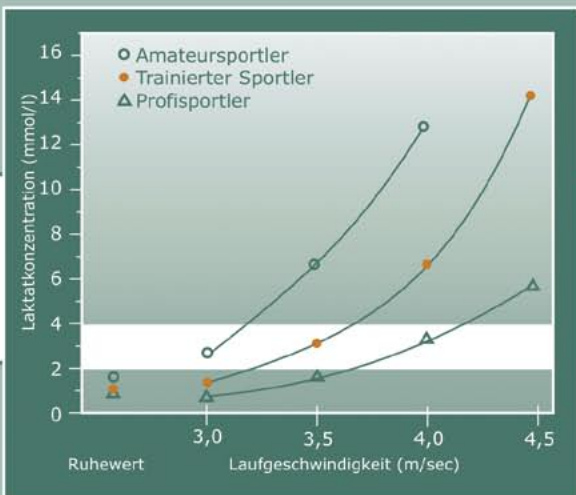

Version 2.0-09/2006
Technische Änderungen vorbehalten
5215-9069-0652



Vertrieb:

EKF - diagnostic sales GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
D-39179 Barleben/Magdeburg

Tel. +49(0)39203-785-0

Fax +49(0)39203-785-24

www.EKF-diagnostic.de



Produzent:

SensLab GmbH
a Member of EKF - Group
Bautzner Str. 67
D - 04347 Leipzig

Tel. +49(0)341-2341841

Fax +49(0)341-2341840

www.senslab.de

LACTATE SCOUT

Kontrollerad
träning behöves




Lactate SCOUT

- Redskapet för effektivare träning!
- Snabba analyser & mycket enkel att använda
- Bara en liten droppe (0,5 µl) blod
- Exakta resultat på 15 sekunder
- Analysområde: 0,5 - 25,0 mmol/l
- Metodfel: 3 - 8% (koncentrationsnivå)
- Minne för 250 testresultat & PC-kompatibel!

Snabbt+enkelt testgenomförande:

- ta fram en testremsa & stick in den i Lactate Scouten
- tvätta noga & torka av ena ringfingeret
- stick en gång med Autolancetten applicerad direkt mot fingertoppen
- torka bort första blodroppen & kläm fram en ny droppe
- för Lactate Scoutens testremsa direkt mot blodroppen
- inom ca 15 sekunder visas resultatet displayen & lagras i minnet
- las av testresultaten på displayen och/ eller överför dem till programvaran

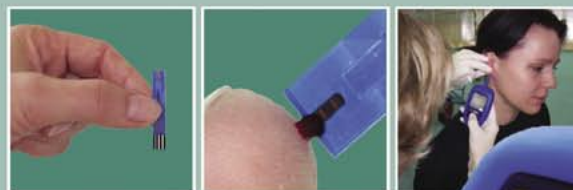

Kan användas i alla miljöer:

- för individuell eller lagträning oavsett nivå
- flexibelt komplement till seriös trainingsuppföljning & labbtester
- för klubben, träningsanläggningar, Personliga Tränare & terapeuter
- för fysiologiska tester & idrottsmedicinsk uppföljning
- det test-kitet ger alla användare en bekväm & hygienisk hantering
- Lactate Scout är akrediterad som medicinteknisk utrustning av bland FDA och i enlighet me EU-direktiv IVD (CE 0123)

LACTATE SCOUT

- professionella mjölksyra-analyser, snabbt & enkelt!
- för optimal prestation & uthållighet!
- bra mätverktyg, för såväl motionären som elitidrottaren!
- objektiv testresultat, som är viktiga för tränaren, utövaren & klubben!

